

Saç biti - gitgide büyüyen bir sorun

Saç biti sorunu 1990'lı yıllardan bu yana artmıştır. Bugün özellikle 3 ile 11 yaş arasındaki çocuklar etkilenmektedir. Bitlerin yarattığı en büyük sorunlar genellikle okullarda ve anaokullarında eğitim dönemi başladığında fark edilir. Bitler kafa derisinin yakınında gelişir. Bitler ne atlayabilir ne de uçabilir. Bu yüzden bitin bir başka insana geçebilmesi ve onu enfekte edebilmesi için yakın temas veya saç-saçta temas gereklidir. Günümüzde birçok çocuk ve yetişkin büyük temas alanlarına sahip olduğundan ve birçok insanla karşılaştığından bitlerin yayılma riskleri artmıştır. Saç bitleri yalnızca çocuklar arasında değil tüm aileler için büyüyen bir sorundur çünkü bitler keşfedilip tedavi edilemeden tüm aile üyelerine kolayca geçebilir.

Neden NitFree kullanmalıyım?

Bugün piyasada bulunan çoğu ürün başlıca bitlerle mücadele etmeyi amaçlar ama genellikle sirkeleri (yumurtaları) yok etmede aynı derecede etkili değildir. Bu da birçok tedavinin uzun bir süre boyunca yerine getirilmesi gerektiği birkaç tedaviyi içerdiği anlamına gelir. Yumurtalar ve bitlerle aynı anda mücadele eden NitFree'nin kullanılması bitlerin biyolojik yaşam döngüsünü bozar. Yumurtalar çatlama şansına sahip olmazlar ve bu da bitlerin çoğalamaması anlamına gelir. Böylece tedavi süresi önemli ölçüde kısaltılabilir.

Tıbbi Ürünler Ajansı bitlenmeyi tedavi etmek için saçları ince dişli bir tarakla taramanın önemini vurgular. Britanya Tıp Dergisinde yayınlanan bir çalışma reçetesiz bit tedavilerine göre taramanın dört kat daha etkili olabileceğini göstermiştir.

NitFree'yi diğer taraklardan ayıran özellik mikro yivli dişleridir, yani aynı anda hem yumurtalar hem de bitler taranarak çıkarılabilir. Geleneksel bir bit tarağını kullanırken çoğu zaman tutkalımsı bir salgıyla saçta yapışmış yumurtaları saçtan ayırmak zordur. NitFree tarak dişleri arasındaki mesafe 0,2 mm'den azdır, bu da en küçük bitlerin

ve yumurtaların da taranarak çıkarıldığı anlamına gelir.

NitFree paslanmaz çelikten yapılmıştır. Dayanıklardır ve zor aşınır ve zarar görmeden kimyasal bit tedavilerine maruz kalabilir. Tekrar kullanıldığında hem şeklini hem görünümünü korur çünkü NitFree lazer teknolojisi kullanılarak hassasiyetle tasarlanmıştır. Tarak sterilize edilebilir ve yayılma riski olmadan tüm aile üyeleri tarafından kullanılabilir.

Kısa bir süre önce kimyasal tedavi kullanımının dirençli bit türlerine yol açtığı konusunda raporlar yazılmıştır. NitFree ile taramak yayılmaya katkıda bulunmaz.

NitFree'nin eşsiz konseptleri

Dayanıklı ve sterilize edilebilir

Paslanmaz çelikten yapıldığı için hem şeklini hem de görünümünü korur.

Daha iyi kavrama için lastik bantlar

Elleriniz nemli veya sabunlu olsa bile tarak kaymaz.

Uzun tarak dişleri

Daha iyi ulaşma. Her tarayışta daha fazla bit ve yumurta taranarak çıkarılabilir.


Tarak dişleri arasında yakın mesafe

Tararken en küçük yumurtalar ve bitler bile çıkarılır.



Eşsiz mikro yivler

Yumurtalar aynı anda hem parçalanıp hem de dışarı çıkarılır. Mikro yivlerin hassas tasarımı ve yuvarlak uçları tarama işlemi sırasında ne saçta ne de kafa derisine zarar verir.

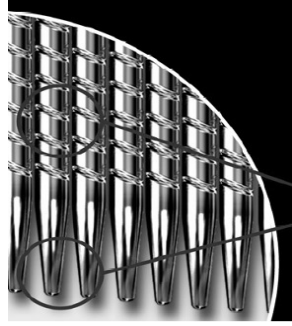

NitFree hakkında müşteri yorumları

"Aylardır bu parazitle mücadele ediyoruz - umutsuzca... Bir satıcı ve pazarlamacı olarak NitFree'nin övüldüğünü duydum ve şöyle düşündüm: "peki, göreceğiz bakalım! Övgüye değer mi...". Kendi deneyimimle şunu söyleyebilirim: işe yarıyor! Taradık, taradık ve taradık! Artık eskiden heyecanla arayıp cimble ayıklamaya çalıştığımız yumurtalardan kurtulduk. Tek bir taramayla. Kendi tarağına sahip olmayan biri olarak bunu okuyorsanız, size en içten önerim, gidip bir tane alın."

Sofie, iki "kalın saçlı" çocuk annesi

"Merhaba, sadece bu muhteşem tarak için yazıp teşekkür etmek istedim! Tarağınızı yaklaşık iki hafta kullandıktan sonra hepimiz bitlerden tamamen kurtulduk. Tarağın kıvrıkcık saçta yararlı olup olmayacağı konusunda başta biraz kuşkuluydum ama çok işe yaradı. Aslında Nitfree'nin normalde kullandığımız diğer taraklardan bile daha iyi olduğunu düşünüyorum."




Tanja, iki kıvrıkcık saçlı çocuk annesi

"3 gün içinde bitlerimizden kurtulduk ve bit tedavilerini bıraktık. Taraktan çok memnunuz. Evde sorunun çözümünün her zaman bulunması iyi."

Per, üç çocuk babası

NitFree nasıl kullanılır

NitFree'yi banyoda kullanın, böylece her taramadan sonra tarađı akan suyun altında kolayca temizleyebilirsiniz.

1. Sađınız kuru olmalı veya statik elektriđi azaltmak için sađınızı hafifçe nemlendirin
2.  Sađı ayırmak ve dolařık sađları açmak için normal bir tarak veya fırça kullanın.
3.  Sađı küçük bölümlere ayırın ve NitFree'yi her bölümden dikkatlice geçirin. Her taramada tarađa nelerin takıldığına bakın. Tarađı beyaz bir kâđıda veya aynaya sallarsanız daha iyi görebilirsiniz. Yumurtaları yakalamak için kafa derisine mümkün olduđunca yakın taramak önemlidir. Taradıđınız bölümler henüz taranmamıř bölümlerden ayrı tutulmalıdır.
4.  Her tarama arasında tarađı temizleyin. Tarađı akan suya tuttuđunuzda tarak diřlerini dikkatlice ayırırsanız bütün bitler ve sirkeler yok olacaktır.
5. İřiniz bittikten sonra tarađı sıcak suda 1 dakika kaynatarak NitFree'yi sterilize edin. Kullanmıř olabileceđiniz tüm diđer tarakları veya fırçaları temizlemeyi unutmayın.

Bütün bitler ve sirkelerden kurtuluncaya kadar yukarıdaki işlemi tekrarlayın. Tedaviyi bitirdikten sonra sorunları erken keřfetmeniz ve bitlerin yayılmasını önlemek için NitFree ile düzenli olarak taramaya devam etmenizi öneriyoruz.

Ailede birisini tedavi ettiđinizde diđer aile üyelerinin de etkilenip etkilenmediđini kontrol etmeyi unutmayın, böylece herkes aynı anda tedavi edilebilir.

www.LusFri.nu

NitFree büyük sađlık mađazalarında ve www.LouseFri.nu'de satılmaktadır.

Farklı dillerde daha fazla bilgi ve kullanıcı talimatları için: www.LouseFri.nu veya eposta: info@lousefri.nu.

Kuzey Ülkelerinde pazarlama:

LusFri

Tutviksvägen 15
136 75 Haninge
İsveç

Tel: +46 (0)73 - 503 3436

www.LusFri.nu

SAÇ BİTİ?

Siz de LusFri.nu olun

Kontrolü elinize alın – yumurtalardan başlayarak



bitlerden hızla kurtulun.

NitFree – yumurtaları ve bitleri aynı anda çıkaran eşsiz mikro yivli bit tarađı.

Paranızın karřılıđı ve dayanıklı. Alerjisi olanlar için önerilir.